

Kaymogyn GmbH Hagenauer Straße 53 a 65203 Wiesbaden

Es schreibt Ihnen:

Mirko Wagner

Geschäftsführer

Fon: +49 611 3347843 - 23

Fax: +49 611 3347843 - 9

E-Mail: mirko.wagner@deumavan.com

www.deumavan.com

Identitätsprüfung Deumavan® Schutzsalbe, Stand Mai 2019


Sehr geehrtes Apotheken Team,

zur Durchführung einer Identitätsprüfung unserer Deumavan® Schutzsalbe empfehlen wir Ihnen die Überprüfung der folgenden Spezifikationsparameter:

Spezifikation	Analyse Deumavan® Schutzsalbe Neutral	Analyse Deumavan® Schutzsalbe Lavendel
<i>Aussehen</i>	weiß	weiß
<i>Geruch</i>	geruchlos	charakteristisch (Lavendel)
<i>Eigenschaften</i>	halbfest	halbfest
<i>FT-IR-Spektrum</i>	Siehe Anlage 1	Siehe Anlage 2

Wir hoffen Ihnen mit dieser Beschreibung geholfen zu haben. Bei Rückfragen können Sie sich gerne unter info@deumavan.com oder 0611-33478430 an uns wenden.

Herzliche Grüße,

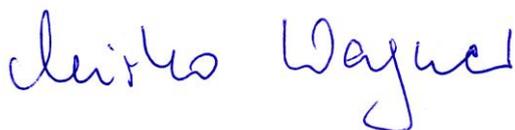

Mirko Wagner
Geschäftsführer Kaymogyn GmbH

Anlagen

Anlage 1: FT-IR Spektrum Deumavan® Schutzsalbe Neutral

Das aufgenommene Spektrum zeigt charakteristische Peaks bei:

- ca. 2920 cm⁻¹
- ca. 2850 cm⁻¹
- ca. 1460 cm⁻¹
- ca. 1375 cm⁻¹
- ca. 720 cm⁻¹

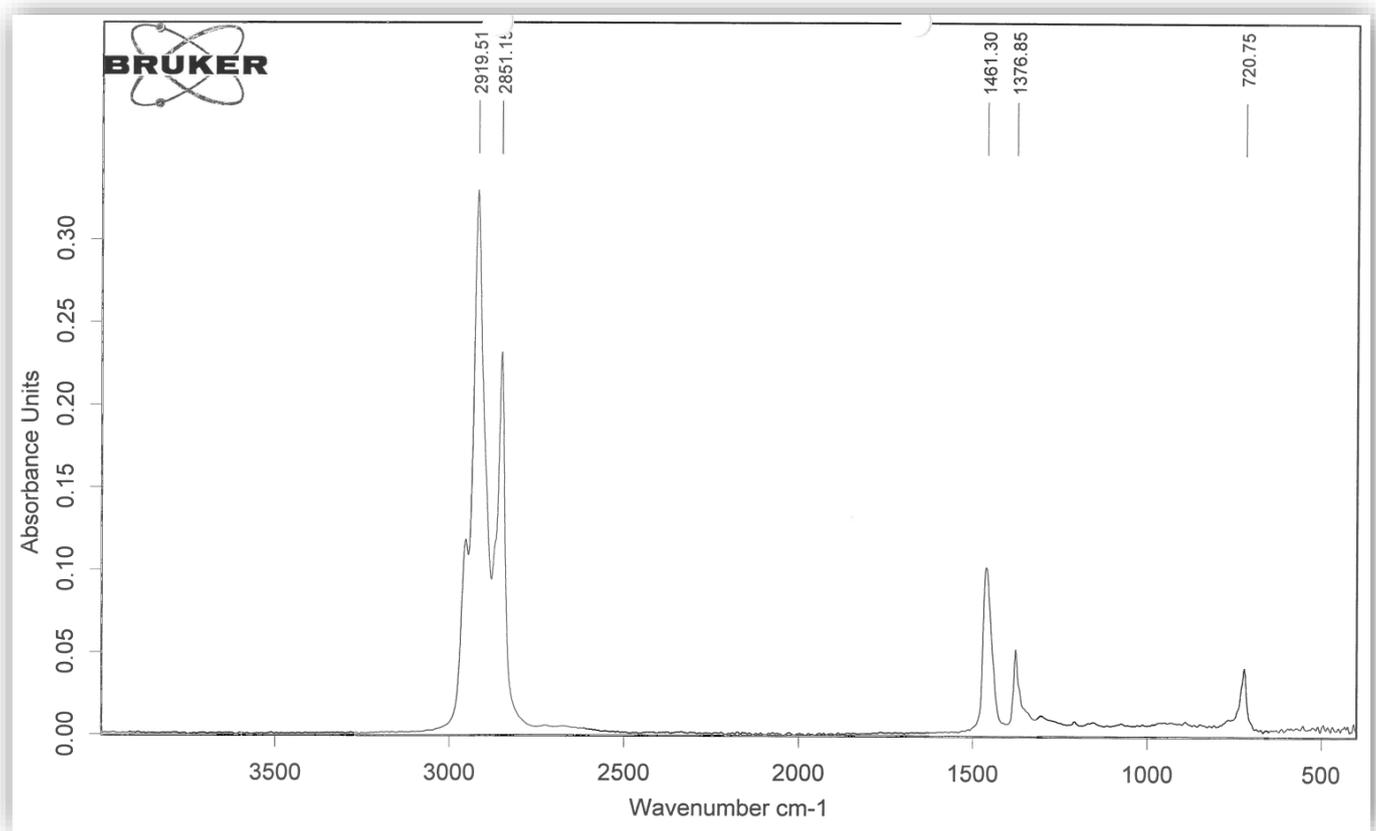


Abbildung 1: FT-IR Spektrum Deumavan® Schutzsalbe Neutral

Anlage 2: FT-IR Spektrum Deumavan® Schutzsalbe Lavendel

Das aufgenommene Spektrum zeigt charakteristische Peaks bei:

- ca. 2920 cm⁻¹
- ca. 2850 cm⁻¹
- ca. 1460 cm⁻¹
- ca. 1375 cm⁻¹
- ca. 720 cm⁻¹

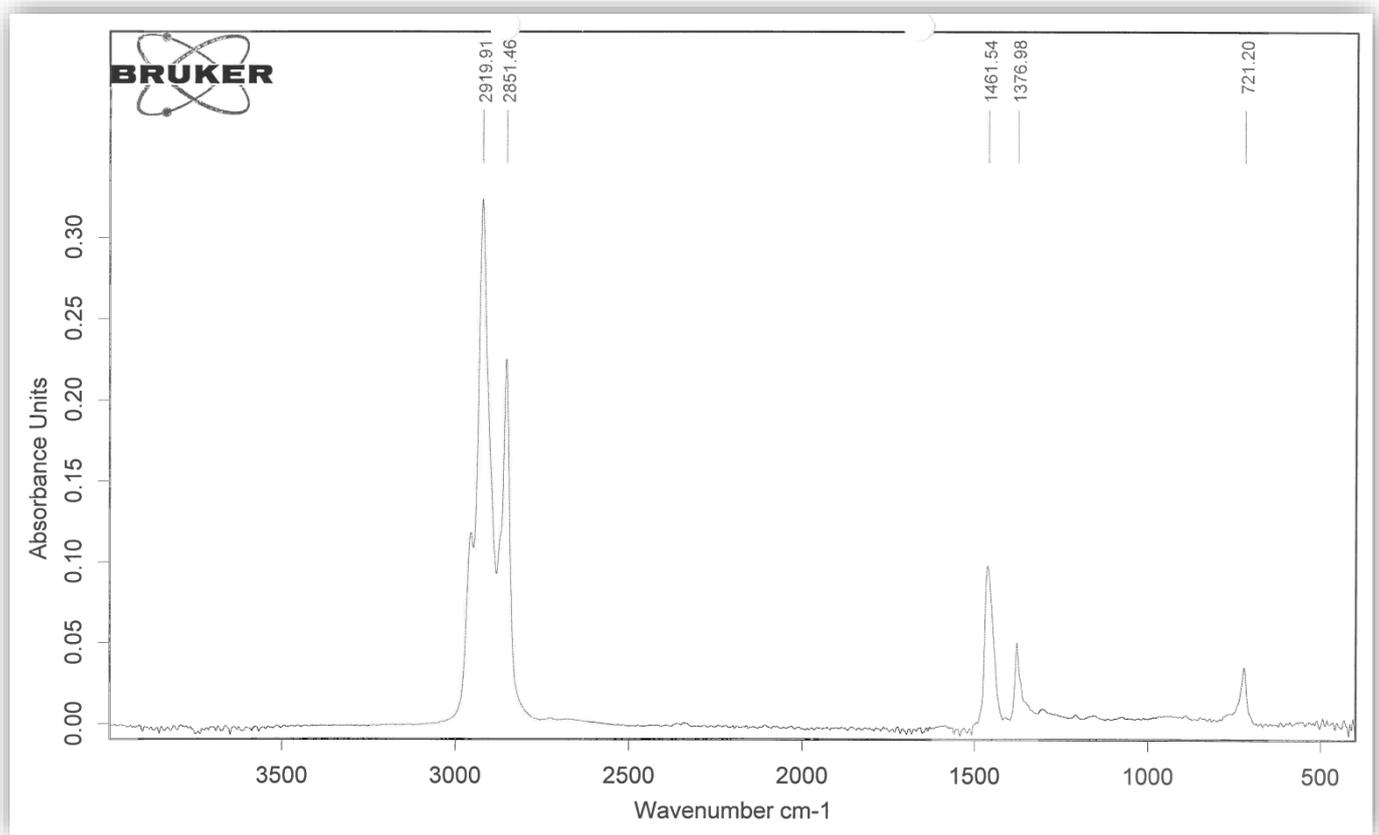


Abbildung 2: FT-IR Spektrum Deumavan® Schutzsalbe Lavendel